

UpCell® シリーズ

トリプシン無しで培養細胞を回収できる温度応答性の培養器材


サンプル品あり

MEMO

UpCell® と通常培養ディッシュとの細胞回収比較

培養細胞を剥離する際にトリプシンなどのタンパク質加水分解酵素を使用すると、細胞はダメージを受け、バラバラの細胞として回収されます。

温度応答性細胞培養器材 UpCell® は、温度応答性ポリマー (PIPAAm) を基材表面に固定化しており、32°C を境に、可逆的に疎水性⇄親水性に変化します。温度処理により、細胞に障害を与えることなく回収することができます。

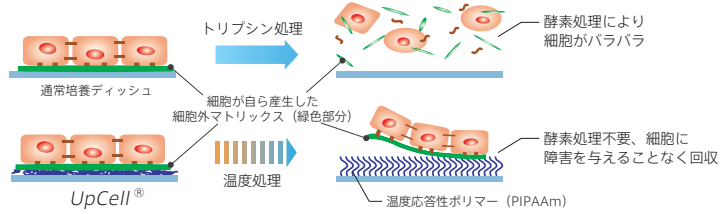

UpCell® プレート/ディッシュ

さまざまなサイズの無傷な細胞シートを回収可能！



[メーカー：CSD]

製品タイプ	商品コード	包装	価格 (¥)
96 well プレート サンプル	CS1002	5 pieces	16,000
	CS1001	20 pieces	58,000
48 well プレート サンプル	CS3011	5 pieces	16,000
	CS3001	20 pieces	58,000
24 well プレート サンプル	CS3012	5 pieces	16,000
	CS3002	20 pieces	58,000
12 well プレート サンプル	CS3013	5 pieces	16,000
	CS3003	20 pieces	58,000
6 well プレート サンプル	CS3014	5 pieces	16,000
	CS3004	20 pieces	58,000
10 cm ディッシュ サンプル	CS3015	5 pieces	26,000
	CS3005	20 pieces	96,000
6 cm ディッシュ サンプル	CS3016	5 pieces	14,000
	CS3006	20 pieces	48,000
3.5 cm ディッシュ サンプル	CS3017	5 pieces	11,000
	CS3007	20 pieces	39,000
3.5 cm ディッシュ 高剥離タイプ サンプル	CS3111	5 pieces	17,000
	CS3101	20 pieces	63,000
3.5 cm ディッシュ 低剥離タイプ サンプル	CS3112	5 pieces	17,000
	CS3102	20 pieces	63,000

サンプル品あり

小包装の無料サンプル品があります。ご希望の方はフナコシ Web のオンラインフォーム (ログインが必要です) をご利用いただくか、当社テクニカルサポート (試薬担当) までお問い合わせ下さい。

※1 回のお申し込みにつき 3 点まで (同一製品のサイズ違いは 2 点まで) とさせていただきます。

UpCell® フラスコ

樹状細胞やマクロファージなど剥離困難な細胞の大量培養・回収にオススメ！



材質	ポリスチレン
キャップ	フィルターキャップ
滅菌	EOG 滅菌済み

UpCell® T75 フラスコ

サイズ：136.1^L×81.0^W×35.4^H mm
培養面積：75 cm²

UpCell® T175 フラスコ

サイズ：227.0^L×115.6^W×46.5^H mm
培養面積：175 cm²

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
UpCell® T75 Flask	CSD	CSUF075	20 pieces / 100,000
	1 袋 4 個入り×5、一重包装		
UpCell® T175 Flask	CSD	CSUF175	4 pieces / 40,000
	1 袋 1 個入り×4、一重包装		

※T25 フラスコサイズの無料サンプル品があります。

UpCell® インサート

生体環境をより高度に再現する共培養系で細胞シートを回収可能！



サイズ	23 ^D ×17 ^H mm
材質 (枠)	ポリスチレン
材質 (膜)	ポリエチレンテレフタレート
メンブレン直径	23 mm ± 10%
ポアサイズ (平均)	0.4 μm
ポア密度 (平均)	2.0×10 ⁶ pore/cm ²
滅菌	EOG 滅菌済み

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
UpCell® 6 well Cell Culture Insert サンプル	CSD	CS3008	12 pieces / 40,000
	1 袋 6 個入り×2、一重包装		