

Microwave Stirrer ご購入を検討中のお客様へ

この度は、Bel-Art 社 Microwave Stirrer (商品コード:370400000) のお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。

Microwave Stirrer は、電子レンジのターンテーブルドライブを利用し、試料を加熱しながら攪拌することができるマグネチックスターラーです。加熱と同時に攪拌が行えますので、加熱の途中で試料を取り出す必要もなく、均一に混和することができます。電気泳動用のアガロースゲル溶解などに最適です。

Microwave Stirrer は電子レンジのターンテーブルドライブを利用しますので、ドライブ部分の構造によって使用できない電子レンジがございます。デモをご依頼いただく前に、お手持ちの電子レンジでMicrowave Stirrer が使用可能かどうか、ご確認ください。

1. 電子レンジにターンテーブル機能があること
オープンレンジなど、ターンテーブル機能がない製品にはご使用いただけません。
2. ターンテーブルを支える回転軸とローラーが一体化していないもの




外周のローラーリングを取り外してご使用ください。
回転軸の形状にもご注意ください(4を参照)



残念ながらご使用いただけません。

3. 電子レンジの庫内サイズおよび使用可能なスターラー
本体 (サイズ:257^W×276^D×67^Hmm) が収納可能な電子レンジで、スターラーバーは 5cm 以下のものが使用可能です。また、加熱に使用する容器 (フラスコやビーカー等) の高さにもご注意ください。
4. 電子レンジの回転軸形状が合わないもの
Microwave Stirrer の回転軸接合部分は、ドライブピンを差し替えることにより、種々の電子レンジに対応可能ではありますが、形状が合わない製品はご使用になれません。使用可能な電子レンジの回転軸の形状は、下図のとおりです。

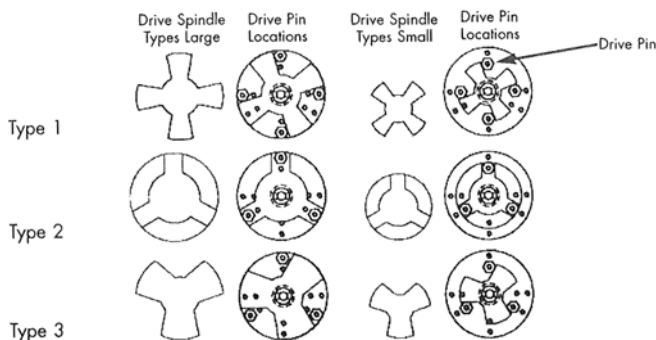

■お問い合わせ先

 **funakoshi**
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

〒113-0033
東京都文京区本郷 2-9-7
www.funakoshi.co.jp
Tel: 03-5684-1619 FAX: 03-5684-5643
e-mail: kiki@funakoshi.co.jp