



Web ページ番号

1823



## 世界的ベストセラーのピペットコントローラー ピペット・エイド® XP

クリーンベンチ内でのピペット操作、培養液の交換など、ライフサイエンス研究において必須の電動式ピペット吸引器具です。



デモ機あり

あらゆる用途に使える  
ファーストチョイス

※オートクレープはできません。

[メーカー：DRM]


ポータブル	充電して使用 (Ni-MH 電池)
スピード設定	吸引/排出を3段階に設定可能 ・F (急速: 10 ml/sec) ・M (中速: 5 ml/sec) ・S (緩速: 1 ml/sec)
TC フィルター	内蔵
サイズ/重量	14 cm / 235 g
商品コード	4-040-101-J
包装/価格 (¥)	1 piece / 42,000



## TC フィルター (セルフロックングフィルター)

ピペット・エイド® はノズルの中に特殊なディスポーザブル TC フィルターを内蔵しています。

誤って液を吸い込みすぎても、このフィルターより先には液を通しません。

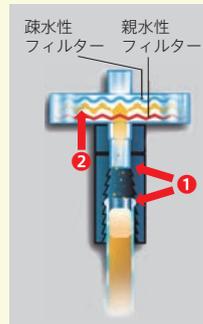

TC フィルター (セルフロックングフィルター) はドラモンド社ピペット・エイド® シリーズに共通してご使用いただける汚染防止フィルターです。

ポアサイズ 0.8 μm の疎水性フィルターと親水性フィルターが2層に重なっています。液体を吸引しすぎた場合 (1), 疎水性フィルターがピペット・エイド内への液体の流入をブロックすると共に、濡れた親水性フィルターが気体の通過をブロックし、吸排出が不能になります (2)。

これにより、エアロゾルの発生を防止し、ピペット・エイドや試料の汚染を防ぎます。

組織・細胞の培養に優れていることから『Tissue Culture フィルター (TC フィルター)』と呼ばれます。

ドラモンドピペット・エイド® 専用の TC フィルター以外を使ってしまうと故障の原因となります。長く大切に使えるよう、ドラモンド社の TC フィルターをお使い下さい。

### ■交換用 TC フィルター

[メーカー：DRM]

仕様	商品コード	包装/価格 (¥)
滅菌済	4-000-051-S	5 pieces / 6,600
非滅菌	4-000-051	5 pieces / 4,500

## ピペット・エイド® XP & Xpress リフレッシュキット

### キット内容


バッテリー (1個)

TC ガasket (2個)

ラバーインサート (1個)

TCハウジング  
※Kitに含まれません。

TC フィルター (1個)

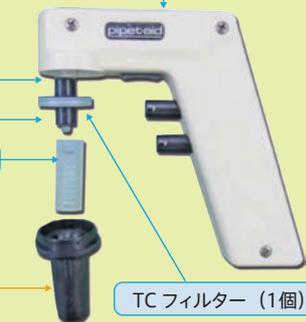

ピペット・エイド®XP, Xpress, PA-400 1台分に必要の消耗部品セットです。

**バッテリーの持ちが悪い、液漏れがする、  
吸引力が弱くなった…**

そんな症状を感じたら、消耗部品を交換することで新品同様に改善することがあります！

各部品の交換方法は付属の説明書  
もしくはフナコシ Web で公開中の  
交換方法動画をご覧ください。

Webに  
動画あり

[メーカー：DRM]

品名	商品コード	包装/価格 (¥)
Pipet-Aid® XP/Xpress Refresh Kit	4-040-091	1 kit / 7,200



Web ページ番号

80098

