

分注 | 溶液調製 | デモ可能

ひとつのボタンで楽々連続分注！電動ピペッター

ali-Q2

セロロジカルピペット用の電動ピペッターです。各社の各容量のセロロジカルピペットを装着できます。ピペットの目盛りを目測することなく、1 ボタンを押すだけで正確に分注/連続分注できます。

簡単操作



分注ボタン

連続分注時の分注量設定範囲：  
0.5~5 ml 通常/VS モデル  
0.3~3 ml LS モデル

通常操作作用吸引・吐出ボタン

ボタンを押し込む強さで  
スピードをコントロール可能



分注スピード設定ダイヤル  
(ali-Q 2 VS のみ)



分注量設定ダイヤル

目測不要



質量：350 g

コードレス (USB 充電)



インテリジェント測定システム搭載！

分注時の使用環境（温度，湿度，気圧），ピペットの傾きをリアルタイムで測定し，分注量を自動補正！  
ピペットの傾きを垂直にするために無理な姿勢を取る必要が無く，快適にご使用いただけます。



自立構造



スタンド付き

ピペットを付けた状態で保持できます。

高い正確性


モデル	分注設定量	正確性/精度 (CV)
通常/VS	5.0 ml	2%/1%
	0.5 ml	2%/2%
LS	3.0 ml	2%/1%
	0.3 ml	3%/3%

※Wobble-not Serological Pipet（下記参照）使用時

[メーカー：VST]

品名	ali-Q 2	ali-Q 2 LS	ali-Q 2 VS
モデル	通常モデル	Low スピードモデル	可変スピードモデル
分注スピード	High	Low	カスタム調整可能 (7 段階)
ダイヤルによる分注スピードの調節	×	×	○
商品コード	2100-0005	2100-0003	2100-1005
包装	1 unit	1 unit	1 unit
価格 (¥)	85,000	85,000	104,000

ぐらつかない (Wobble-not) セロロジカルピペット

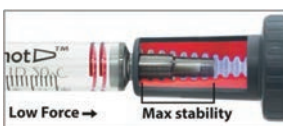

少ない力で差し込めて，しっかり固定できます。  
液だれもありません。

こちらもオススメ