



液体分注ポンプ FlexiPump Pro / FlexiPump



FlexiPump Pro

16.1^W×33.2^D×20.8^H cm, 5.55 kg

FlexiPump

16.1^W×27.3^D×20.8^H cm, 5.4 kg

- 連続吸引・吐出など様々な操作が正確に行えます。
- 実験に合わせた分注プログラムを最大 32 種類保持できます。保存したプログラムはワンボタンで呼び出せます。
- 付属の分注チューブセットはオートクレーブ可能です。
- 使用例：お好みの分注作業がプログラムできます
 - ・液体培地 2 ml を 5 秒間隔で 30 回分注
 - ・寒天培地 100 ml を 10 秒間隔で 10 回分注
 - ・200 ml/分の一定速度で連続吐出

[メーカー：ILB]

モデル	FlexiPump Pro (ダブルポンプ)	FlexiPump (シングルポンプ)
分注間隔設定	0.1 秒 ~ 99.9 秒	
分注スピード	3 ml/分 ~ 2.5 L/分	1.5 ml/分 ~ 1.25 L/分
ポンプ回転数	10 ~ 550 rpm	
外部出力	USB, RS 232 コネクター	—
電源	100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 50 W	
商品コード	562-000 ▲	561-000 ▲
包装	1 unit	
価格 (¥)	760,000	640,000

※プリンターは付属していません。詳細は当社機器担当までお問い合わせ下さい。

別売品 便利なオプション



手元のボタンで分注できる
Handy Gun



チューブを固定するアーム
Adjustable
Dispensing Arm

[メーカー：ILB]

品名	商品コード	包装	価格 (¥)
Handy Gun	561-001	1 piece	60,000
Adjustable Dispensing Arm	561-002	1 piece	67,000

分注と秤量の機能が備わった自動希釈液注入装置 DiluFlow Elite

試料の質量に応じて正確かつ再現性のある希釈を自動で行えます。




希釈液を高速分注

ホモジナイズの前処理に


分注所要時間
90 ml : <6 秒, 225 ml : <9 秒
(ファストモード、プースターキット*使用)

シングルポンプ : 31.3^W×42.1^D×37.7^H cm
ダブルポンプ : 37^W×42.1^D×37.7^H cm

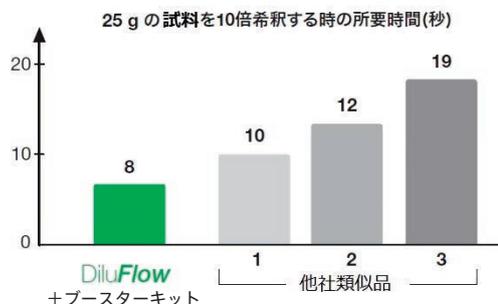

他社類似品との分注速度比較

別売のプースターキットを使用すると、わずか8秒で225 ml (25 gの試料を10倍希釈する場合の溶液量)を分注します。

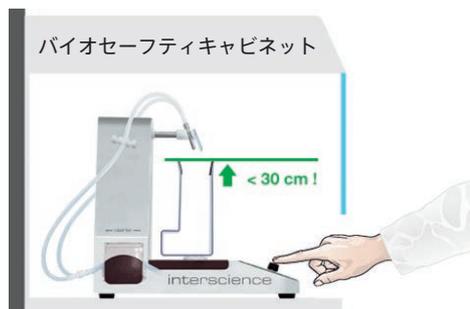

セーフティキャビネット内でも使いやすい高さ

バッグ設置の高さが非常に低く (<30 cm)、特にセーフティキャビネット内で使用の際、操作性が高まります。

[メーカー：ILB]

最大秤量	1,000 g		5,000 g	
ポンプ数	シングル	ダブル	シングル	ダブル
希釈倍率	2 ~ 1,000 倍			
秤量精度	0 ~ 20 g : ±0.01 g, 20 ~ 1,000 g : ±0.1%		0 ~ 100 g : ±0.05 g, 100 ~ 5,000 g : ±0.1%	
最大ポンプ数	2 ポンプ (固定) + 4 ポンプ (外付け)			
希釈/分注モード	ファスト, スタンダード, アクキュレート			
商品コード	503-101 ▲	503-201 ▲	503-105 ▲	503-205 ▲
包装	1 unit		1 unit	
価格 (¥)	1,850,000	2,100,000	1,760,000	2,000,000

*スピードアップ用のプースターキットは別売です。詳細は当社機器担当までお問い合わせ下さい。